

INSTRUCTIONS

Setting Up Your Safe Place Bed



Safe Place
Bedding LLC



Youtube-Video:
Grundausrüstung des Safe Place Bettes

1. Jedes Safe Place Bed Modell 100 besteht aus einer Leinwandabdeckung mit vier aufblasbaren Objekten im Inneren, vier Gurten und einer Anleitung.

2. Stellen Sie das Safe Place Bett auf ein stationäres Bett, das mindestens 135cm breit ist, und klappen Sie es auf. Stellen Sie sicher, dass das Netz an der Tür, die Ihnen am nächsten ist, vollständig sichtbar ist.




3. Ziehen Sie eine Reißverschlusslasche aus der Leinentasche und öffnen Sie den Reißverschluss, bis er 2-3 cm über dem Ventil am Schlauchboot ist (öffnen Sie den Reißverschluss nicht vollständig, da er sich sonst nach dem Aufblasen nur schwer schließen lässt). Stellen Sie sicher, dass das schwarze Ventil vollständig und ohne Spalt in die durchsichtige Öffnung eingesetzt ist.



4. Wiederholen Sie den Vorgang für alle vier Seiten des Safe Place Bed

5. Blasen Sie alle vier Seiten des Safe Place Bed auf. Möglicherweise müssen Sie die Luftpumpe in einem schwarzen Ventil halten. Das Safe Place Bett sollte aufrecht sein.

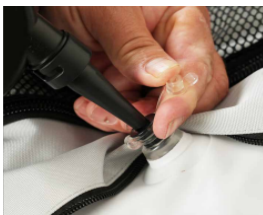

6. Um das aufblasbare Gerät abzudichten, stecken Sie den durchsichtigen Stopfen in das schwarze Einwegventil und drücken Sie dann das Ventil in die aufblasbare Kammer. Wiederholen Sie den Vorgang für alle vier Ventile. Schließen Sie alle vier Kammern und schieben Sie die Reißverschlusslasche zurück in die Canvas-Tasche.



7. Stellen Sie das Safe Place Bett in die Mitte des stationären Bettes. Zwischen den Längskanten des Safe Place Bettes und der Kante der Matratze sollte mindestens 10 cm Platz sein. Orientieren Sie sich an dem Bild. Ein durchgehendes Bettgitter muss verwendet werden, wenn das stationäre Bett weniger als 135 cm breit ist.



8. Verbinden Sie zwei Gurte mit der langen Seite des Safe Place Bettes. Führen Sie die Gurte unter das stationäre Bett und befestigen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite des Safe Place Bettes. Ziehen Sie die Gurte fest – siehe Schritt 9 für Details.

Verbinden Sie zwei Gurte mit der kurzen Seite des Safe Place Bettes. Führen Sie die Gurte unter das stationäre Bett und befestigen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite des Safe Place Bettes. Ziehen Sie die Gurte fest. Die Gurte sollten unter dem stationären Bett einen "Hashtag #" bilden.



YouTube-Video: Das Bett zusammenklappen

9. Entfernen Sie den Durchhang von jedem der vier Gurte, bis das Safe Place Bett fest mit dem stationären Bett verbunden ist. Ziehen Sie die Gurte in der Mitte der Schnalle nach oben, um das Spiel über der Schnalle zu verringern. Um das Umreifungsband zu verriegeln, ziehen Sie am Ende des Umreifungsbandes



*Beachten Sie, dass sich an jedem Gurt zwei Schnallen befinden.

Wenn Sie die Gurte nicht festziehen, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Bitte überprüfen Sie bei jedem Gebrauch die Umreifungsbander und Schnallen auf Beschädigungen.

Reißverschluss:

Verbinden Sie den Verschluss mit der Reißverschlusslasche und ziehen Sie das Stoffband fest, bis kein Spalt mehr zwischen der Reißverschlusslasche und dem Tuch entsteht.

Achten Sie beim Aufblasen und Entleeren des Bettes darauf, dass die Türen geschlossen und verriegelt sind.



Tägliche Kontrollen während der Nutzung des Safe Place Bed

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Safe Place Bed das Netz auf Unvollkommenheiten.
- Drücken Sie alle vier Schlauchboote zusammen, um sicherzustellen, dass sie noch aufgeblasen sind. Wenn eine Kammer entleert ist, entfernen Sie den durchsichtigen Stopfen und das schwarze Einwegventil aus der durchsichtigen Kunststofföffnung, reinigen, trocknen, ersetzen Sie sie und blasen Sie sie wieder auf. Verwenden Sie das Bett 24 Stunden lang nicht, um sicherzustellen, dass das Schlauchboot Luft hält. Wenn es wieder entleert wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Ziehen Sie an allen vier Gurten, um sicherzustellen, dass jeder Gurt fest sitzt, und überprüfen Sie, ob sich das Safe Place Bett in der Mitte des stationären Bettes befindet.
- Überprüfen Sie, ob der Reißverschluss ordnungsgemäß funktioniert, wenn Sie die Tür schließen.
- Überprüfen Sie den Reißverschluss und ziehen Sie ihn gegebenenfalls fest.
- Wenn es Probleme mit einem der oben genannten Punkte gibt, verwenden Sie das Safe Place Bett nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Reinigung:

- Reinigen Sie das Bett mit warmem Wasser. Verwenden Sie kein Waschmittel, da dadurch die wasserdichte Beschichtung des Stoffes entfernt wird.

Wechseln einer aufblasbaren Kammer:



So ändern Sie die Endkammer (Dreieck)

Öffnen Sie beide Reißverschlüsse und lassen Sie die Luft aus dem Schlauchboot entleeren.

Ziehe das aufblasbare Zelt aus der Plane.

Kehren Sie den Vorgang um, um die aufblasbare Kammer auszutauschen, und stellen Sie sicher, dass das Ventil nach außen zeigt.



So ändern Sie die lange Kammer (Rechteck):

- Öffnen Sie beide Reißverschlüsse vollständig und lassen Sie die Luft aus dem Schlauchboot.
- Schieben Sie die aufblasbare Kammer an der Oberseite des Canvas-Hohlraums entlang.
- Bewegen Sie sich auf die gegenüberliegende Seite des Safe Place Bed und ziehen Sie die aufblasbare Kammer durch
- Kehren Sie den Vorgang um, um die aufblasbare Kammer auszutauschen, und stellen Sie sicher, dass das Ventil nach außen zeigt.



Zusammenklappen des Safe Place Bed



Warnungen:

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da Kleinteile vorhanden sind und Erstickungsgefahr besteht.

Kein Rauchen oder Wärmequellen um die Produkte herum.

Von Wasser fernhalten, nicht von Schwimmhilfen.

Kein Spielzeug.

Wenn eine Seite des Bettes entleert wird, hören Sie auf, das Bett zu benutzen.

Halten Sie scharfe Gegenstände vom Produkt fern, Einstiche fallen nicht unter die Garantie und können zu Verletzungen des Kindes führen.

- Bei Gebrauch fest am stationären Bett befestigen, nicht unabhängig getestet.

Das Safe Place Bett ist 105 cm breit und 190 cm lang und muss auf einem stationären Bett verwendet werden, das mindestens 135 cm breit und 190 cm lang ist.

- Der Reißverschluss muss vor dem Gebrauch festgezogen und dann jede Nacht überprüft werden, um ein Einklemmen zu verhindern.

Überwachen Sie den Benutzer genau, wenn der Benutzer oder andere Personen Zugang zur Außenseite des Safe Place Bed haben, können unter anderem Strangulation durch Gurte, Erstickten am Reißverschluss und Einklemmen bestehen.

